

使用說明書 使用说明书 User Manual

PA-ED01

珮肌美眼儀(冰火小熨斗)

The Beauty Of Skin And Mind



# 目錄

注意事項	02
產品介紹	08
使用方法	10
功能說明	11
護理順序	11
產品規格	12
保養售後	13
免責聲明	15

非常感謝您購買本公司的商品。為確保您能正確安全 使用本美眼儀

- 請務必仔細閱讀使用說明書並遵守相關內容
- 閱讀後請妥善保管
- 如需把本儀器轉讓給別人時, 請務必将使用說明書
- 一併交給對方閱讀並保管

# 安全注意事項

- 警告:如果不遵循使用說明 可能導致不良影響
- 使用前 請仔細閱讀「安全注意事項」
- 請按照正確步驟適當使用
- 發生異常時, 請立即停止使用
- 如果在故障情況下使用, 會對身體產生不良影響
- 為了防止對您或他人造成人身危害或財產損失, 現以圖示列明危害和損失的程度.

▲ 危險:極有可能造成人員死亡或重傷

★ 警告: 可能造成人員死亡或重傷

★ 注意: 可能造成人員輕傷或財產損失,包括房屋、

家具、家畜、寵物等的損失

◇ 禁止:表示禁止的事項

### ⚠ 危險

切勿在可能導致醫用電子儀器發生故障的情況下使用。

如使用下述器用電子儀器 請勿使用本美眼儀。

否則可能因醫用電子儀器的錯誤運行導致事故及身體不適。

- 心臟起搏器等體內植入式醫用電子儀器
- 人工心肺機等用於維持生命的醫用電子儀器
- 心雷圖監測儀. 輸液器等個載型器用電子儀器

# ⚠ 警告

#### \_\_\_\_ 下列人士請勿使用,否則可能造成事故或身體傷害

- 正在接受治療,及伴有發燒症狀、或患有感染性 疾病。急性病者
- 內臟疾病患者
- 結核病患者
  - 心臟病、血壓異常、惡性腫瘤患者
- 血友病、出血性疾病、糖尿病、面部神經痛的患者
- 因愛滋病等免疫力缺乏症而造成免疫力下降,或正在 使用免疫抑制劑的人十
- 牙齒治療期間或曾經補牙的人十
- 知覺. 痛覺異常. 無法感應溫度的人十
- 瘢痕疙瘩體質、患有臉部黑皮病、光過敏症、色素 異常症的人士
- 長期使用類固醇激素類藥物或因肝功能障礙而引發毛 細血管擴張的人士
- 過敏體質、遺傳性皮炎、過敏性皮炎、皮膚病、 敏感肌或肌膚脆弱的人士
- 曾有癲癇病史或會因光線閃爍而感到不適的人士
- 因交通事故等造成頭部或眼部後遺症的人士
- 曾接受過面部或眼部手術的人(接受過激光原位角膜 磨鑲術的人士)請咨詢醫生後再使用
- 幼兒、無法自己表達意思的人士
- 身體正在發育者
- 高度近視的人士 (-6D以上)
- 孕婦、生理期中、哺乳期中
- •醉酒、宿醉的人士
- 正在服用安眠藥物的人士
- 極度疲勞、身體不適的人士
- 曾因化學纖維而引發色斑、接觸性皮膚炎等肌膚問題的人士

- 會因化妝品而引發或曾經引發過皮炎的人士
- 因物理性刺激等導致起斑的人士
- 因曬傷導致皮膚發炎或紅腫者
- 皮膚化體或有炎症者 痤疮患者
- 近期在護膚沙龍等接受過醫美療程的人十(如化學換膚等)
- 使用美容儀器後曾出現肌膚問題的人
- 延長或重复在一個表面部位使用本美眼儀可能導致對 皮膚潛在的損害
- 不要更改或取消美眼儀固有的安全裝置

### 請勿用於以下部位:

- 心臟周圍、上眼皮及眼瞼(COOL功能除外)、嘴唇和口腔 內等處的粘膜部位
- 黑皮病、病態色斑、痣或病毒性疣的部位
- 因過度日曬而引發肌膚刺痛、炎症的部位
- 有傷口、濕疹、干癬、疱疹、化膿的痤瘡和青春痘的部位
- 發審 發熱 物理性刺激等引發病理性色斑的部位
- 曾接受手術的部位、陰部、肛門、喉結周邊、耳朵
- 近期接受過脫毛或剃毛處理的部位
  - ※ 如果您正在接受醫院治療,請在使用前咨詢醫生。 如不確認自己是否有上述症狀,請在使用前征求 醫生意見。

# ○ 禁止

- 請勿和其他美眼儀同時使用
- 請勿過度連續使用,以及護理頭無法完全貼合的部位, 否則可能造成燙傷或低溫燙傷
- 請勿在肌膚較薄的部位、骨骼上方處長時間使用
- 請確保滑動使用, 請勿長時間貼於同一部位使用
- 請勿連續用於同一部位。否則可能會傷害肌膚或造成 感染、炎症、出血、色素沉澱等肌膚問題或導致症狀惡化

- 請勿在儀器損壞、故障的狀態下使用
- 請勿用於非美容目的
- 本美眼儀為美容專用護理儀器、請勿用於操作說明書 注明外的治療目的或其他用途
- 請勿使田在寵物身上
- 請勿投入火中或在高溫、高熱環境下充電、使用或放置。
   否則會引起發熱 着火或故障
- 請勿在浴室或濕氣重。 有油煙的地方充電。 使用或保管
- 請勿放置在容易碰到水 (洗臉台上等) 的位置
- 請勿將本儀器浸在水中,或是將水淋到或灑到本儀器上。
   (否則會導致觸電、短路、火災或故障)
- 請勿在浴缸、淋浴間、水盆或其他含水的容器附近使用
- 請勿以濕手觸碰儀器(否則會導致觸電、短路、火災 或故障)
- 請勿在可燃性物品附近使用(如酒精、稀釋液、揮發油、 去光水、洗甲水、噴霧等)。否則會引起發熱、着火或故障
- 請勿在灰塵多或陽光直射的場所使用
- 請勿在電磁波或磁場較強的場所使用
- 請勿放入微波爐或高壓容器中
- •請勿在溫度變化劇烈的場所使用(如空調、暖氣等旁邊)
- 如散發異味及異常發熱時請立即停止使用。否則 會引起損壞或着火
- 請勿把重物壓在主機上,使用時請勿跌落或碰撞, 可能會引起故障或造成腳部受傷等
- •請勿放置於不穩定、易傾斜、震動、碰撞的場所
- 不建議14歲或以下的兒童使用本儀器
- 兒童在未經監護下不得使用,清潔和維修本儀器
- 身體、感覺或精神能力下降、缺乏經驗和知識的 人士不得使用,需在監護或指導使用
- 使用輸出端功率不大於15W的電源適配器
- 本儀器不得在皮膚破損的部位使用

- 僅使用製造商推薦的一次性和消耗性材料
- 最大輸出電壓: 30V A C

# ↑ 注意

- 請勿持续在某一處強力按壓使用 容易造成肌膚受傷
- 請勿將護理頭與其他金屬物質碰撞。否則會造成發熱、 火災、故障、破損等
- 使用前,請確保護理頭是否有開裂、破損、變形等問題。如發現有上述情況,請勿使用。繼續使用或會造成肌慮損傷或操作故障等
- 請勿在極熱、極寒等極端環境下使用。(推薦使用 環境溫度:約15°C至30°C)
- 電源開啟時,請勿放置於地板或家具上。使用後 請立即關閉電源。否則會造成家具損傷或引起受傷
- 電源開放時,請勿與其他電子產品(如電熱毯)接觸 使用。否則會造成故障或受傷
- 請勿將本儀器連接到金屬或電器產品(如手機、電視等)
- 請勿與去角質護膚品或去角質面膜搭配使用。否則會 造成肌膚問題

## ▲ 警告 (關於充電)

- 請確保USB充電線完全插入充電端口 否則會引起觸電、短路、火災
- 請勿把USB充電線損壞、加工、強行彎曲、任意彎折、 拉扯、扭曲、在上面放置重物、緊夾等。否則會導致 火災、觸電或故障
- 移動、拿起產品時,請勿拉扯USB充電線。否則會引起 觸電、短路、火災或接觸不良等情況
- USB充電線如有損壞或出現鬆脫情况,請停止使用
- 插拔USB充電線時,請務必手持USB前端插拔。 請勿手持電線插拔及觸碰金屬部分

- 丰濕時請勿插拔USB充電線
- 請勿讓USB充電線沾水. 浸水或水洗
- USB充電線和充电端口若有凝膠、護膚品等殘留時 請勿充電
- 不使用時 : 請拔掉USB充電線
- 請避免插座過載 (否則會遵致發執或火災)
- 僅適用於家用插座
- 如出現下述狀況,請停止使用並關閉電源, 將USB充電線從插座上拔除
  - -雷雷天氣 地震等情況
  - -接線冒煙、異常發熱、發出異臭、變形
- 萬一發生異常. 請立即切斷電源. 停止使用

# ○ 禁止拆卸


 請勿自行拆卸、改造或修理本儀器。修理時請咨詢 購買產品的店鋪

# ⚠ 使用上注意

- 使用時,本儀器可能會發熱,但不會產生安全上的問題
- 使用前、請先清潔護理頭、以免引起肌膚問題
- 使用時,請務必摘下貴金屬類、眼鏡和隱形眼鏡 ※貴金屬類:耳環、項鏈、戒指、手錶等
- 請勿將護理頭用力按壓在肌膚上,請勿連續停留在同一部位超過3秒。同一模式每天建议使用不超过一次, 過度使用會導致肌膚問題
- 護理眼周肌膚時, 請閉上雙眼後再使用
- 使用过程中請適時補充護膚品以保持水潤
- 肌膚表面有強烈刺痛感時,請更換使用部位、並補充凝胶 或其它水溶性护肤品等激潤皮膚後再使用
- 使用時如感到肌膚或身體疼痛、異常時,請立即停止 使用並咨詢醫生


- 過度護理反而會影響肌膚健康
- 請根据肌膚狀態使用
- 請在卸妝潔而後 塗抹水溶性護膚品 再進行護理
- 使用時請視肌膚狀態而定,若肌膚出現皮疹、發紅、 瘙癢等異常狀況,請停止使用,並咨詢專科醫生

# 產品介绍

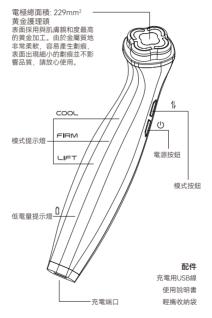


低電量提示燈	0
熄滅	電量充足
亮紅燈	電量不足,請充電
紅燈閃爍	即將關機, 請充電

# 使用家用插座充電:

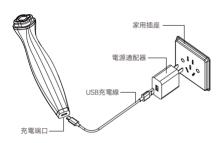

# 使用電腦充電:

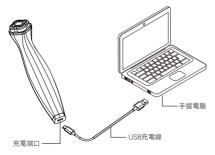

# 使用方法

- 首次使用時請確保電池充滿。充電時低電量提示燈 □ □ □ 會顯示紅燈閃爍。充電完成後 低電量提示燈熄滅。
- 長按"(少"按鈕開機,開機時機身下殼"coou"燈開始閃爍, 上殼 logo"(2)" 熔會高起(10秒後熔白動熄滅)。
- 4. "COOL"模式預設的工作時間為3分鐘,前1.5分鐘请先護 理左眼圈,1.5分鐘後有提示音請轉至另一側在右眼圈繼續 使用。模式完成後有提示音並且自動轉入下一個模式的待 機狀態 模式顯示勞閃煙。
- 5." FIRM "模式預設的工作時間為5分鐘,前2.5分鐘请先護 理左側,2.5分鐘後有提示音請轉至另一側護理。模式完成 後有提示音並且自動轉入下一個模式的待機狀態,模式顯 示燈閃爍。
- 6." LIFT"模式預設的工作時間為5分鐘,前2.5分鐘请先護 理左側,2.5分鐘後有提示音請轉至另一側護理。模式完成 後有提示音並自動關機。
- 7. 長按"①"電源按鈕關機。

### 注意:

- 雖然本儀器設有防止低溫灼傷的裝置,但為了能更安全, 請務必在 FIRM / LIFT 模式下滑動使用。
- 護理眼周部位時. 請閉上雙眼。

### 儀器提示音說明:

- FIRM / LIFT 模式時, 停留於同一位置超過3秒時會發出 "嘀嘀嘀"的聲音警告。
- 所有模式在建議護理時間一半時,均會發出"嘀"提示音 提醒切換至另一側護理。
- 各模式完成建議護理時間後, 會發出長 " 嘀~~ " 的提示音。

# 功能說明

### 冷凍模式(COOL Mode)

冷凍可促進血管收縮,從而消除水腫、收緊及舒緩鎮定眼周的肌膚 緊致手孔, 服脫再現

### 緊倒模式(FIRM Mode)

從皮膚底層溫熱肌膚,達致肌膚緊緻、富有彈性、飽滿的效果 對皺紋、細紋、皮膚懸弛等問題有明顯的幫助。

## 提拉模式(LIFT Mode)

配合溫熱及微電流,使肌膚緊緻的同時讓肌肉得到拍打和提拉,促進肌肉細胞的新陳代謝,達到提升輪廓的效果。

# 護理順序

### 滑動方式

參考滑動速度: 2cm/秒, 若熱感變強, 請加快滑動速度。

### 注意

- 使用時,護理頭請務必完全接觸肌膚。
- 請務必滑動使用。
- 同一位置連續使用有造成肌膚低溫燙傷的風險。
- 請勿貼於上眼皮及喉嚨區域使用(COOL冷凍模式除外)。



請按左圖的次序滑動使用 注意: 陰影部分禁止使用 (COOL冷凍模式除外)

# 护理建议

模式	推薦 护肤品*	時間	強度	使用頻率 (參考)**
COOL 冷凍模式	可以配合/不配合 眼部精華	約3分鐘	1種	每天
FIRM 緊緻模式	専用凝膠/ 眼部精華	約5分鐘	1種	2-3次/周
LIFT 提拉模式	専用凝膠/ 眼部精華	約5分鐘	1種	2-3次/周

- \* 請務必使用水溶性護膚品。請勿使用油性、磨砂類的護膚 品。會造成機器故障或肌膚問題。
- \*\*只供參考用,可根據個人需求調整。

# 產品規格

產品名稱	Paige Luminous Timeless 美眼儀
產品型號	PA-ED01
額定輸入	5V === 2A
額定輸出	約10W
充電時間	約1小時
使用時間	約40分鐘
外形尺寸	約34mm(長) x 48mm(橫) x 163mm(高)
產品重量	約 118 克

\* 充電時間跟額定輸入有關,上述充電時間是在5V 2A的額定輸入狀態下的時間,如果額定輸入低過5V 2A, 充電時間會延長。

# 保養售後

### 護理後保養:

每次使用後,請即時清潔,保持主機潔淨。清潔方法如下:

- 請用浸過水並擰干的柔軟布料擦去本儀器污垢。
   若使用硬布擦拭可能造成主機表面劃傷,並使功能降低。
- ※ 勿使用碱劑、酒精、稀釋液、苯、揮發油、汽油等溶劑 或卸甲水、研磨粉、熱水、藥品類。
- ※ 本機上沾有美容液或凝膠時 請於清潔後再保管
- 清潔完成後請蓋上保護蓋,以免護理頭被其他物件碰撞 造成劃痕。

### 請勿保管在以下場所:

- 陽光直射、潮濕、易燃或粉磨多的地方
- 高溫或零度以下的地方, 烈日下的汽车內等場所
- 有化學藥品或產生煤氣的地方, 振動強烈的地方
- 供熱器具和發熱器具的附近 磁石的附件

### 注意

如半年以上未使用本儀器時,使用前請務必確保無異常後 再使用。如檢查是否有無裂縫等。若在故障狀態下使用, 會導致事故。

### 售後服務:

原廠保養兩年(詳情請參閱官網上的保修條款) 請於官網登記包裝盒背面的序號(S/N),以便進行產品保養。

### 充電電池:

- 本儀器包含充電池, 充電池必須由專業人士進行更換
- · 充電電池為消耗品 (不在保養範圍內)
- 充電後使用時間極短時,可能是電池壽命問題
- 需要更換充電電池時,請咨詢經銷商

### 關於廢棄及環保:

- 廢棄本儀器時, 請依照當地法律規定進行廢棄
- 內置的鋰離子充電電池內包含的物質可能對環境有害, 廢棄本儀器前必須把電池取出
- 取出電池前本儀器必須斷電, 電池必須被安全地處理
- 不要使用其他電池來替換本機內的電池,特別是不可充 電電池。這可能引發火災或電擊等危險
- 不要將電池與一般家庭垃圾一起丟棄,確保電池廢棄於 官方的回收處理中心或收集點

### 聯絡方式:

香港公司:銀雄有限公司

電話: 852-21866089

地址:香港新界葵涌大連排道21-33號宏達工業中心1307室

深圳公司:深圳天浩銀雄科技有限公司

電話: 86-13378665715

地址:深圳市光明區馬田街道石圍社區將石路181號

電郵:cs@regal-silver.com

請先以電郵方式聯絡客服,確認後再把美容儀寄到上述地址。

# 免責聲明

銀雄有限公司致力確保所有在本說明書內為最新及準確的 資料,但不會為任何錯誤或遺漏的資料負責。所有資料如 有修改恕不另行通知。

銀雄有限公司不會因涉嫌使用或誤用或過過任何本說明書 產品包裝和宣傳單列出之使用方法以外的其他方法使用本 產品而招致的任何損失承擔任何責任或作任何賠償。使用 珮肌美眼儀的時候,顧客有責任了解及遵守所有產品安全 訊息。

銀雄有限公司並不保證珮肌美眼儀的效果。珮肌美眼儀的 效果視乎使用者本身的皮膚狀況。我們強烈建議所有使用 者在使用任何產品之前咨詢合資格就業醫生的意見。

以上陳述並未經過食品和藥物管理局的評估。

銀雄有限公司所研發的產品並非旨在診斷、治療、治癒和 預防任何疾病。在使用任何產品之前,若有疑問,請諮詢你 的專業健康顧問。

未經銀雄有限公司的正式書面授權,本說明書不得以任何 形式複製或以任何語言翻譯。





官網 (HK website)



微博扫码 关注动态







o paigeluminous |Q













天猫搜索"珮肌" 咨询购买

京东搜索"珮肌" 咨询购买

小红书搜索"珮肌" 关注动态

抖音搜索"珮肌" 关注动态

# 目录

<b>注</b> 思事坝	18
产品介绍	24
使用方法	26
功能说明	27
护理顺序	27
产品规格	28
保养售后	29
免责声明	31

非常感谢您购买本公司的商品。为确保您能正确安全 使用本美眼仪

- 请务必仔细阅读使用说明书并遵守相关内容
- 阅读后请妥善保管
- 如需把本仪器转让给别人时,请务必将使用说明书
- 一并交给对方阅读并保管

# 安全注意事項

- 警告:如果不遵循使用说明 可能导致不良影响
- 使用前 请仔细阅读「安全注意事项」
- 请按照正确步骤适当使用
- 发生异常时,请立即停止使用
- 如果在故障情况下使用、会对身体产生不良影响
- 为了防止对您或他人造成人身危害或财产损失, 现以图示列明危害和损失的程度。

⚠ 危险: 极有可能造成人员死亡或重伤

★ 警告: 可能造成人员死亡或重伤

★ 注意: 可能造成人员轻伤或财产损失,包括房屋、

家具、家畜、宠物等的损失

◇ 禁止:表示禁止的事项

### ⚠ 危险

切勿在可能导致医用电子仪器发生故障的情况下使用。

如使用下述医用电子仪器 请勿使用本美眼仪。

否则可能因医用电子仪器的错误运行导致事故及身体不适。

- 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
- 人工心肺机等用于维持生命的医用电子仪器
- 心电图监测仪。 输液器等佩戴型医用电子仪器

# ⚠ 警告

#### <u>——</u> 下列人士请勿使用,否则可能造成事故或身体伤害

- 正在接受治疗,及伴有发烧症状、或患有感染性 疾病、急性病者
- 内脏疾病患者
- 结核病患者
- 心脏病、血压异常、恶性肿瘤患者
- 血友病、出血性疾病、糖尿病、面部神经痛的患者
- 因艾滋病等免疫力缺乏症而造成免疫力下降,或正在 使用免疫抑制剂的人十
- 牙齿治疗期间或曾经补牙的人十
- 知觉 痛觉异常 无法感应温度的人十
- 瘢痕疙瘩体质、患有脸部黑皮病、光过敏症、色素 异常症的人十
- 长期使用类固醇激素类药物或因肝功能障碍而引发毛细血管扩张的人士
- 过敏体质、遗传性皮炎、过敏性皮炎、皮肤病、 敏感肌或肌肤脆弱的人士
- 曾有癫痫病中或会因光线闪烁而感到不适的人十
- 因交通事故等造成头部或眼部后遗症的人士
- 曾接受过面部或眼部手术的人(接受过激光原位角膜 磨镶术的人士)请咨询医生后再使用
- 幼儿、无法自己表达意思的人士
- 身体下在发育者
- 高度近视的人士 (-6D以上)
- 孕妇、生理期中、哺乳期中
- •醉酒、宿醉的人士
- 正在服用安眠药物的人士
- 极度疲劳、身体不适的人士
- 曾因化学纤维而引发色斑、接触性皮肤炎等肌肤问题的人士

- 会因化妆品而引发或曾经引发过皮炎的人士
- 因物理性刺激等导致起斑的人士
- 因晒伤导致皮肤发炎或红肿者
- 皮肤化脓或有炎症者 痤疮患者
- 䜣期在护肤沙龙等接受讨医美疗程的人十 (如化学换肤等)
- 使用美容仪器后曾出现肌肤问题的人
- 延长或重复在一个表面部位使用本美眼仪可能导致对 皮肤潜在的损害
- 不要更改或取消美眼仪固有的安全装置

### 请勿用干以下部位:

- 心脏周围、上眼皮及眼睑(COOL功能除外)、嘴唇和口腔 内等外的粘膜部位
- 黑皮病、病态色斑、痣或病毒性疣的部位
- 因过度日晒而引发肌肤刺痛、炎症的部位
- 有伤口、湿疹、干癣、疱疹、化脓的痤疮和青春痘的部位
- 发痒 发热 物理性刺激等引发病理性色斑的部位
- 曾接受手术的部位、阴部、肛门、喉结周边、耳朵
- 近期接受过脱毛或剃毛处理的部位
  - ※ 如果您正在接受医院治疗,请在使用前咨询医生。 如不确认自己是否有上述症状,请在使用前征求 医生意见。

# ○禁止

- 请勿和其他美眼仪同时使用
- 请勿过度连续使用,以及护理头无法完全贴合的部位, 否则可能造成烫伤或低温烫伤
- 请勿在肌肤较薄的部位、骨骼上方处长时间使用
- 请确保滑动使用,请勿长时间贴于同一部位使用
- 请勿连续用于同一部位。否则可能会伤害肌肤或造成 感染、炎症、出血、色素沉淀等肌肤问题或导致症状恶化

- 请勿在仪器损坏、故障的状态下使用
- 请勿用干非美容目的
- 本美眼仪为美容专用护理仪器、请勿用于操作说明书 注册外的治疗目的或其他用涂
- 请勿使用在宠物身上
- 请勿投入火中或在高温、高热环境下充电、使用或放置。
   否则会引起发热、着火或故障
- 请勿在浴室或湿气重。有油烟的地方充电。使用或保管
- 請勿放置在容易碰到水 (洗臉台上等) 的位置
- 请勿将本仪器浸在水中,或是将水淋到或洒到本仪器上。
   (否则会导致触电、短路、火灾或故障)
- 請勿在浴缸、淋浴間、水盆或其他含水的容器附近使用
- 请勿以湿手触碰仪器(否则会导致触电、短路、火灾或放障)
- 请勿在可燃性物品附近使用(如酒精、稀释液、挥发油、 去光水、洗甲水、喷雾等)。否则会引起发热、着火或故障
- 请勿在灰尘多或阳光直射的场所使用
- 请勿在电磁波或磁场较强的场所使用
- 请勿放入微波炉或高压容器中
- 请勿在温度变化剧烈的场所使用(如空调、暖气等旁边)
- 如散发异味及异常发热时请立即停止使用。否则 会引起损坏或着火
- 请勿把重物压在主机上,使用时请勿跌落或碰撞, 可能会引起故障或造成脚部受伤等
- 请勿放置于不稳定、易倾斜、震动、碰撞的场所
- 不建议14岁或以下的儿童使用本仪器
- 儿童在未经监护下不得使用, 清洁和维修本仪器
- 身体、感觉或精神能力下降、缺乏经验和知识的 人士不得使用。需在监护或指导使用
- 使用输出端功率不大于15W的电源适配器
- 本仪器不得在皮肤破损的部位使用

- 仅使用制造商推荐的一次性和消耗性材料
- 最大輸出电压: 30V A C

# ★ 注意

- 请勿持续在某一处强力按压使用,容易造成肌肤受伤
- 请勿将护理头与其他金属物质碰撞。否则会造成发热、 火灾、故障、破损等
- 使用前,请确保护理头是否有开裂、破损、变形等 问题。如发现有上述情况,请勿使用。继续使用或 会造成肌肤损伤或操作故障等
- 请勿在极热、极寒等极端环境下使用。(推荐使用 环境温度:约15°C至30°C)
- 电源开启时,请勿放置于地板或家具上。使用后 请立即关闭电源。否则会造成家具损伤或引起受伤
- 电源开启时,请勿与其他电子产品(如电热毯)接触 使用。否则会造成故障或受伤
- 请勿将本仪器连接到金属或电器产品(如手机、电视等)
- 请勿与去角质护肤品或去角质面膜搭配使用。否则会 造成肌肤问题

# 警告 (关于充电)

- 请确保USB充电线完全插入充电端口 否则会引起触电、短路、火灾
- 请勿把USB充电线损坏、加工、强行弯曲、任意弯折、 拉扯、扭曲、在上面放置重物、紧夹等。否则会导致 火灾、触电或故障
- 移动、拿起产品时,请勿拉扯USB充电线。否则会引起 触电、短路、火灾或接触不良等情况
- · USB充电线如有损坏或出现松脱情况,请停止使用
- 插拔USB充电线时,请务必手持USB前端插拔。 请勿手持电线插拔及触碰金属部分

- · 手湿时请勿插拔USB充电线
- · 请勿让USB充电线沾水、浸水或水洗
- USB充电线和充电端口若有凝胶、护肤品等残留时 请勿充电
- 不使用时, 请拔掉USB充电线
- 请避免插座过载。(否则会导致发热或火灾)
- 仅适用干家用插座
- 如出现下述状况,请停止使用并关闭电源, 将USB充电线从插座上拔除
  - -雷电天气 地震等情况
  - -接线冒烟、异常发热、发出异阜、变形
- 万一发生异常 请立即切断电源 停止使用

# ○ 禁止拆卸


 请勿自行拆卸、改造或修理本仪器。修理时请咨询 购买产品的店铺

# ★ 使用上注意

- 使用时,本仪器可能会发热,但不会产生安全上的问题
- 使用前,请先清洁护理头,以免引起肌肤问题
- 使用时,请务必摘下贵金属类、眼镜和隐形眼镜 ※贵金属类:耳环、项链、戒指、手表等
- 请勿将护理头用力按压在肌肤上,请勿连续停留在同一部位超过3秒。同一模式每天建议使用不超过一次,过度使用会导致肌肤问题
- 护理眼周肌肤时,请闭上双眼后再使用
- 使用过程中请适时补充护肤品以保持水润
- 肌肤表面有强烈刺痛感时,请更换使用部位、并补充凝胶 或其它水溶性护肤品等滋润皮肤后再使用
- 使用时如感到肌肤或身体疼痛、异常时,请立即停止 使用并咨询医生


- 过度护理反而会影响肌肤健康
- 请根据肌肤状态使用
- 请在卸妆洁面后 涂抹水溶性护肤品 再进行护理
- 使用时请视肌肤状态而定,若肌肤出现皮疹、发红、 瘙痒等异常状况,请停止使用,并咨询专科医生

# 产品介绍

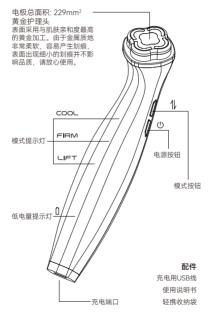


低电量提示灯	٥
熄灭	电量充足
亮红灯	电量不足, 请充电
红灯闪烁	即将关机, 请充电

# 使用家用插座充电:

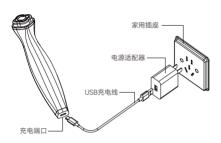

# 使用电脑充电:

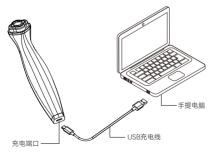

# 使用方法

- 首次使用时请确保电池充满。充电时低电量提示灯"()" 会显示红灯闪烁。充电完成后低电量提示灯熄灭。
- 长按"心"按钮开机, 开机时机身下壳"coou"灯开始闪烁, 上壳 logo"(2)"灯会亮起(10秒后灯自动熄灭)。
- 3. 短按" 1 "按钮选择模式,模式指示灯亮并按以下的顺序 可循环进行模式切换: \$\cool\_ > -FBM->-\LIFT.\$\chi
- 4. "COOL"模式预设的工作时间为3分钟,前1.5分钟请先护理左眼圈,1.5分钟后有提示音请转至另一侧在右眼圈继续使用。模式完成后有提示音并且自动转入下一个模式的待机状态、模式显示灯闪烁。
- 5." FIRM "模式预设的工作时间为5分钟,前2.5分钟请先护理左侧,2.5分钟后有提示音请转至另一侧护理。模式完成后有提示音并且自动转入下一个模式的待机状态,模式显示灯闪烁。
- 6." LIFT"模式预设的工作时间为5分钟,前2.5分钟请先护理左侧,2.5分钟后有提示音请转至另一侧护理。模式完成后有提示音并自动关机。
- 7. 长按 "①" 电源按钮关机。

### 注音·

- 虽然本仪器设有防止低温灼伤的装置,但为了能更安全, 请务必在 FIRM / LIFT 模式下滑动使用。
- 护理眼周部位时, 请闭上双眼。

### 仪器提示音说明:

- FIRM / LIFT 模式时, 停留于同一位置超过3秒时会发出 "嘀嘀嘀"的声音警告。
- 所有模式在建议护理时间一半时,均会发出"嘀"提示音 提醒切换至另一侧护理。
- 各模式完成建议护理时间后, 会发出长 " 嘀~~ " 的提示音。

# 功能说明

### 冷冻模式(COOL Mode)

冷冻可促进血管收缩,从而消除水肿、收紧及舒缓镇定眼周的肌肤 紧致毛孔, 服除再现。

### 紧致模式(FIRM Mode)

从皮肤底层温热肌肤, 达致肌肤紧致、富有弹性、饱满的效果 对皱纹、细纹、皮肤松弛等问题有明显的帮助。

## 提拉模式(LIFT Mode)

配合温热及微电流, 使肌肤紧致的同时让肌肉得到拍打和提拉, 促进肌肉细胞的新陈代谢, 达到提升轮廓的效果。

# 护理顺序

### 滑动方式

参考滑动速度: 2cm/秒, 若热感变强, 请加快滑动速度。

### 注意

- 使用时、护理头请务必完全接触肌肤。
- 请务必滑动使用。
- 同一位置连续使用有造成肌肤低温烫伤的风险。
- 请勿贴于上眼皮及喉咙区域使用(COOL冷冻模式除外)。



请按左图的次序滑动使用 注意: 阴影部分禁止使用 (COOL冷冻模式除外)

## 护理建议

模式	推荐 护肤品*	时间	强度	使用频率 (参考)**
COOL 冷冻模式	可以配合/不配合 眼部精华	约3分钟	1种	每天
FIRM 紧致模式	专用凝胶/ 眼部精华	约5分钟	1种	2-3次/周
LIFT 提拉模式	专用凝胶/ 眼部精华	约5分钟	1种	2-3次/周

<sup>\*</sup> 请务必使用水溶性护肤品。请勿使用油性、磨砂类的护肤品。会造成机器故障或肌肤问题。

# 产品规格

产品名称	Paige Luminous Timeless 美眼仪
产品型号	PA-ED01
额定输入	5V === 2A
额定输出	约10W
充电时间	约1小时
使用时间	约40分钟
外形尺寸	约34mm(长) x 48mm(宽) x 163mm(高)
产品重量	约 118 克

<sup>\*</sup> 充电时间跟额定输入有关,上述充电时间是在5V 2A的额定输入状态下的时间, 如果额定输入低过5V 2A, 充电时间会延长。

<sup>\*\*</sup>只供参考用,可根据个人需求调整。

# 保养售后

### 护理后保养:

每次使用后 请即时清洁 保持主机洁净。清洁方法如下:

- 请用浸过水并拧干的柔软布料擦去本仪器污垢。
   若使用硬布擦拭可能造成主机表面划伤,并使功能降低。
   ※ 勿使用碱剂、酒精、稀释液、苯、挥发油、汽油等溶剂或卸甲水、研磨粉、热水、药品类。
  - ※ 本机上沾有美容液或凝胶时 请干清洁后再保管
- 清洁完成后请盖上保护盖,以免护理头被其它物件碰撞 造成划痕。

### 请勿保管在以下场所:

- 阳光直射、潮湿、易燃或粉尘多的地方
- 高温或零度以下的地方, 烈日下的汽车内等场所
- 有化学药品或产生煤气的地方、振动强烈的地方
- 供热器具和发热器具的附近 磁石的附件

### 注意

如半年以上未使用本仪器时,使用前请务必确保无异常后 再使用。如检查是否有无裂缝等。若在故障状态下使用, 会导致事故。

### 售后服务:

原厂保养两年(详情请参阅官网上的保修条款) 请于官网登记包装盒背面的序号(S/N)以便进行产品保养。

### 充电电池:

- 本仪器包含充电池, 充电池必须由专业人士进行更换
- · 充电电池为消耗品 (不在保养范围内)
- 充电后使用时间极短时、可能是电池寿命问题
- 需要更换充电电池时,请咨询经销商

### 关于废弃及环保:

- 废弃本仪器时, 请依照当地法律规定进行废弃
- 内置的锂离子充电电池内包含的物质可能对环境有害, 废弃本仪器前必须把电池取出
- 取出电池前本仪器必须断电, 电池必须被安全地处理
- 不要使用其他电池来替换本机内的电池,特别是不可充电 电池,这可能引发火灾或电击等危险
- 不要将电池与一般家庭垃圾一起丢弃,确保电池废弃于 官方的回收处理中心或收集点

### 联络方式:

香港公司:银雄有限公司

电話: 852-21866089

地址:香港新界葵涌大连排道21-33号宏达工业中心1307室

深圳公司:深圳天浩银雄科技有限公司

电話:86-13378665715

地址:深圳市光明区马田街道石围社区将石路181号

电邮:cs@regal-silver.com

请先以电邮方式联络客服,确认后再把美容仪寄到上述地址。

# 免责声明

银雄有限公司致力确保所有在本说明书内为最新及准确的 资料,但不会为任何错误或遗漏的资料负责。所有资料如 有修改恕不另行通知。

银雄有限公司不会因涉嫌使用或误用或通过任何本说明书 产品包装和宣传单列出之使用方法以外的其他方法使用本 产品而招致的任何损失承担任何责任或作任何赔偿。使用 佩肌美眼仪的时候,顾客有责任了解及遵守所有产品安全 讯息。

银雄有限公司并不保证珮肌美眼仪的效果。珮肌美眼仪的 效果視使用者本身的皮肤狀況。我们强烈建议所有使用者 在使用任何产品之前咨询符合就业资格医生的意见。

以上陈述并未经过食品和药物管理局的评估。

银雄有限公司所研发的产品并非旨在诊断、治疗、治愈和 预防任何疾病。在使用任何产品之前,若有疑问,请咨询 你的专业健康顾问。

未经银雄有限公司的正式书面授权,本说明书不得以任何 形式复制或以任何语言翻译。







官網 (HK website)



微博扫码 关注动态



SEMPaige |Q



paigeluminous |Q|













天猫搜索"**珮肌"** 咨询购买 京东搜索"**珮肌**" 咨询购买

小红书搜索"**珮肌**" 关注动态 抖音搜索"**珮肌**" 关注动态

# **Table of contents**

Safety precautions	34
Product Details	40
Use method	42
Function description	43
Treatment sequence	43
Product Specification	44
Warranty	45
Disclaimer	47

Thank you for choosing our products! To ensure proper and safe use:

- . Please take the time to read this manual carefully and follow the instructions provided.
- . After reading, please keep the manual in a safe place for future reference.
- . If you plan on transferring the device to another user, be sure to provide them with the manual as well, so they can also familiarize themselves with its usage.

### SAFFTY PRECAUTIONS

- . Warning: Not following the instructions could result in negative consequences.
- . Please read the "Safety Precautions" carefully before using the device.
- . Proper usage requires following the steps correctly.
- . If you notice any abnormalities, stop using the device immediately.
- . Using the device in an improper condition can result in harm to the body.
- . To prevent personal injury or damage to property, the below diagrams included in this manual clearly indicate the potential extent of injury and loss.

⚠ Danger: An accident that could result in death or serious injury.

Marning: An accident that may cause death or serious injury.

Caution: An accident that could result in minor personal injury or property damage, including damage to household furniture, livestock, or pets.

Prohibition: Indicates prohibited matters.

↑ DANGER

Do not use in situations that may cause medical electronic equipment to malfunction.

If you are using any of the medical electronic equipment listed below, please do not use this device. Otherwise, incorrect operation of the medical electronic equipment may cause accidents and physical discomfort.

- . Cardiac pacemaker and other implanted electronic medical instruments.
- . life support equipment such as artificial heart and lung machines.
- . Wearable electronic medical instruments such as electrocardiography monitors and infusion sets



# This device should not be used by the following individuals as it may result in accidents or bodily injury:

- Those who are currently receiving medical treatment or have fever symptoms as it may interfere with their medical condition.
- . Visceral disease patients.
- . Tuberculosis patients.
- . Patients with heart disease, abnormal blood pressure, and malignant tumors.
- . Patients with hemophilia, bleeding disorders, diabetes, facial neuralgia.
- Individuals with weakened immunity due to diseases such as AIDS or who are using immunosuppressants.
- . Individuals undergoing dental treatment or have had dental fillings.
- Individuals with abnormal perception, sensation of pain or inability to sense temperature.
- . Individuals with keloids, facial melanosis, photosensitivity, or dyspigmentation.
- Individuals suffering from telangiectasias caused by prolonged use of steroid hormone drugs or liver dysfunction.
- Individuals with allergies, hereditary dermatitis, atopic dermatitis, skin diseases, sensitive or fragile skin.
- Individuals with a history of epilepsy or who experience discomfort from exposure to flickering lights.
   Individuals with sequelae of the head or eves due to traffic accidents or other
- similar incidents.

  Individuals who have had face or eye surgery, including LASIK, should consult
- a doctor before using the device.

  Individuals who cannot express themselves, including young children.
- . Individuals who are still developing.
- . Individuals with high myopia (above-6D).
- . Pregnant women and women who are menstruating or lactating.
- . Individuals who are drunk or have a hangover.
- . Individuals who are taking sleeping pills.
- . Individuals who are extremely tired or unwell.
- . Individuals who have skin problems such as pigmentation and contact dermatitis.
- . Individuals who have had or currently have dermatitis caused by cosmetics.
- Individuals who have spots or any other skin condition caused by physical stimulation.

- . Individuals who have skin inflammation or redness caused by sunburn.
- . Individuals with skin purulent, inflammation or acne.
- Individuals who have recently undergone cosmetic treatment at beauty salons (such as chemical peels).
- . Individuals who have experienced skin problems after using beauty equipment.
- Using this beauty device repeatedly or for an extended period on the same area of skin could potentially cause damage.
- . Do not bypass or disable the inherent safety features of the beauty device.

### Do not use the device on the following body parts and areas:

- . Mucous membranes around the heart, upper eyelids, lips, and inside the mouth (except for COOL mode)
- . Areas of melanosis, lesion, mole or viral wart.
- . Areas that cause skin irritation and inflammation due to excessive sun exposure
- . Areas with wounds, eczema, psoriasis, herpes, purulent acne and pimples.
- . Itching, fever, physical stimulation and other parts that cause pathological pigmentation.
- . Areas that have undergone surgery, genitals, anus, around Adam's apple, ears .
- . Areas that have been recently depilated or shaved.
- ※ It is important to consult your doctor before using the device if you are receiving hospital treatment or have any medical concerns. If you are unsure about any symptoms you may have, please seek medical advice before using the device.

# PROHIBITION

. Do not use simultaneously with other beauty devices.

- Do not use the device excessively or continuously in areas where the treatment head cannot fully fit, as it may result in burns or low-temperature burns.
- . Do not use the device for a prolonged period of time on thin skin or over bones.
- Be sure to use the device by sliding it and avoid keeping it in one place for an extended period of time.
- Avoid using on the same area continuously as it may lead to skin damage and other issues like infection, inflammation, bleeding, pigmentation, or worsen existing symptoms.
- . Do not use the device if it is damaged or not functioning properly.
- . Do not use the device for any purpose other than its intended cosmetic use.
- . Do not use this device on pets.
- . To prevent overheating, fire, or malfunction, do not expose the device to high temperatures or heat sources, and do not attempt to charge the device in heated environments or by throwine it into a fire.

- . This beauty device is intended for cosmetic use only. Do not use it for any treatment or purpose other than those specified in the user manual.
- Do not charge, use, or store the device in the bathroom or in areas with high humidity, or in environments with high levels of oil or smoke.
- . Do not place the device in areas where it may come into contact with water, such as near a sink or washstand.
- . Do not use or expose the device to water, as it may result in electric shock, short circuit, fire, or malfunction.
- . Do not use this device near a bathtub, shower, sink, or other container with water.
- Do not touch the device with wet hands, as it may result in electric shock, short circuit. fire or malfunction.
- Do not use the device near flammable items, such as alcohol, thinner, volatile oil, lighter fluid, nail polish remover, or sprays, as it may cause heat generation, fire, or malfunction.
- . Do not use the device in heavily dusty areas or under direct sunlight.
- . Do not use the device in areas with strong electromagnetic waves or magnetic fields.
- . Do not place in a microwave oven or high pressure container.
- Avoid using in areas with sudden temperature changes (such as near air conditioners or heaters).
- Immediately halt use if you detect an unusual odor or if the device becomes excessively hot. Continuing use may result in damage or fire.
- Do not place heavy objects on top of the main unit, and be careful not to drop or bump it while using it to avoid any malfunctions or injuries.
- Do not keep the device in places that are prone to instability, tilting, vibrations, or collisions. Avoid dropping or bumping the main unit as it can cause mechanical failure or injury.
- . It is not recommended for children 14 years old or younger to use this device.
- . Children must not use, clean, or maintain this device without supervision.
- . This device may not be used by individuals (including children) who have reduced physical, sensory or mental capabilities, lack experience and knowledge,
- unless they are under supervision or have been instructed.
- . Use a power adapter with an output power no greater than 15W.
- . This device must not be used on areas of broken skin.
- Use only the disposable and consumable materials recommended by the manufacturer.
- . Maximum output voltage: 30V AC.

# **↑** CAUTION

- . Avoid applying excessive pressure or focusing on a single area while using the device as this can result in skin injury.
- Avoid colliding the treatment head with other metal objects as it may result in heat generation, fire, failure, or damage.
- Before use, inspect the treatment head for cracks, damages, deformations or other issues. Do not use the device if any of these problems are found, as it may result in skin damage or malfunction.
- Do not use the device in extreme environmental conditions, such as extremely hot
  or cold temperatures. (The recommended ambient temperature range for using
  the device is between 15°C to 30°C.)
- Do not place the device on the floor or furniture when it is turned on. Turn off the power immediately after use to prevent damage to furniture or potential injury.
- . Avoid contact with other electronic products such as electronic blankets while the device is in use and the power is turned on. This may cause malfunction or injury.
- Do not connect this device to other metallic or electronic products such as mobile phones or television sets.
- Do not use this device in combination with exfoliating skin care products or masks, as this may lead to skin issues.

# WARNING (About Charging)

- . Ensure that the charging port is securely inserted into the charging base, and the USB charging cable is fully plugged into the base port, when charging the device. Failure to do so may result in electric shock, short circuit, or fire.
- Do not damage, bend, pull, twist, or place heavy objects on the USB charging cable, or clamp it tightly. Such actions may cause fire, electric shock, or malfunction.
- When moving or picking up the device, do not pull the USB charging cable.
   This may cause electric shock, short circuit, fire, or poor contact.
- . If the USB charging cable is damaged or loose when plugged into the socket, stop using it immediately.
- . When connecting or disconnecting the USB charging cable, it is important to hold the front of the USB and avoid touching the metal parts.
- . Avoid inserting or removing the USB charging cable when your hands are wet.
- . Keep the USB charging cable and base away from water to prevent any potential hazards such as electric shock or damage to the device.

- Clean the USB charging cable and base before charging to prevent any residue from affecting the charging process.
- . Unplug the USB charging cable if the device is not in use.
- To prevent heat generation or fire, avoid overloading the sockets with too many devices or appliances.
- . This device is intended for household use only.
- . If the following situations occur, please stop using the device, turn off the power and unplug the USB charging cable from the socket:
- Thunderstorms, earthquakes, etc.
- Wiring smoke, abnormal heat, strange smell, deformation.
- . If an abnormal situation occurs, immediately turn off the power and stop using the device.

# PROHIBITION OF DISASSEMBLY

. Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device on your own.

If repairs are needed, please consult your dealer.


# CAUTION ON USE

- . The device may become warm during use, which is normal and poses no safety issues.
- . It is important to clean the treatment head before each use to prevent skin irritation or other issues.
- . It is important to remove any precious metal jewelry, glasses, contact lenses, or other items before using the device to prevent potential damage or irritation \*\* Precious metal: ear rine, necklace, rine & watch, etc.
- . When using the treatment head, do not apply too much pressure on the skin, and avoid staying in one place for more than 3 seconds. To avoid skin problems, do not use on the same area repeatedly within 24 hours.
- . When using the device on the skin around the eyes, be sure to close your eyes to avoid discomfort or injury.
- . Please keep the skin moisturized between the treatment head and your skin by applying skin care products regularly.
- If you experience a stinging sensation on the skin, move to a different area, and apply moisturizer before continuing use.
- If you experience pain or any abnormal sensations on your skin or body.
   while using the device, stop using it immediately and seek medical advice.
- . Excessive use of the device may have adverse effects on the health of your skin.

- . It is important to use the device in accordance with the condition of your skin.
- . It is recommended to apply water-soluble skincare products only after properly removing any makeup, cleanser, and debris from the face.
- . It is important to regularly assess the condition of your skin while using theproduct.


  If you experience any symptoms such as rashes, redness, itching or
  other abnormalities, stop using the product and seek the advice of a specialist

# PRODUCT DETAILS

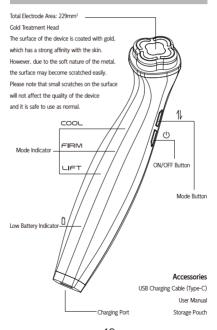


Low Battery Indicator 🗋		
Off	Fully Charged	
Red	Low Battery, need to be recharged	
Flashing Red Light	Very Low Battery, recharge immediately	

# Charging Using A Household Socket:

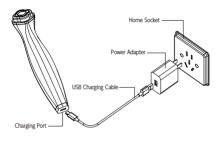

# Charging Using A Computer:

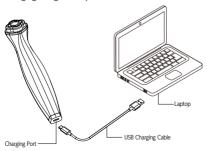

# USE METHOD

- When using for the first time, please ensure the battery is fully charged. During charging, the low battery indicator light " 0" will flash red. Once charging is complete, the low battery indicator light will turn off.
- 2. Press and hold the " (L)" button to turn on. When powered on, the "COOL" light will begin to flash, and the logo light "(2)" will illuminate (the light will automatically turn off after 10 seconds).
- Press the "1," button to select the mode. The mode indicator light will turn on, and you can cycle through the modes in the following order:
- 4. The "COOL" mode has a preset working time of 3 minutes. For the first 1.5 minutes, a prompt sound will indicate to switch to the right eye area. After 1.5 minutes, a prompt sound will indicate to switch to the right eye area. After the mode is completed, a prompt sound will play, and it will automatically stop and enter standby mode. In standby mode, the indicator light for the next mode will flash.
- 5. The "FIRM" mode has a preset working time of 5 minutes. For the first 2.5 minutes, please care for the left side. After 2.5 minutes, a prompt sound will indicate to switch to the other side. Once completed, a prompt sound will play again, and it will automatically stop and enter standby mode. In standby mode, the indicator light for the next mode will flash.
- 6. The "Lif" "mode has a preset working time of 5 minutes. For the first 2.5 minutes, please care for the left side. After 2.5 minutes, a prompt sound will indicate to switch to the other side. Once completed, a prompt sound will play, and it will automatically power off.
- 7. Press and hold the " (1) " power button to turn off.

### CAUTION:

- . Although it is equipped with a device that prevents low-temperature burns, for safety purposes, please be sure to use it by sliding in FIRM / LIFT mode.
- . It is important to keep your eyes closed during the use of this eye beauty device.

# Description of audible signal:

- . The "Dee Dee Dee " warning sound will be emitted in FIRM / LIFT mode if the device stays in one position for more than 3 seconds.
- . When each mode reaches half of the recommended care time, " Dee " sound will be emitted to prompt switching to the other side for care.
- . At the end of the recommended care time for each mode, along " Dee " sound will be emitted as a prompt.

# **FUNCTION DESCRIPTION**

### COOL MODE

The cooling effect promotes blood vessel contraction, reducing swelling and soothing the skin around the eyes. It tightens pores and rejuvenates the eyes.

### FIRM MODE

This mode warms the skin from the deeper layers, achieving a firm and elastic effect. It significantly helps with wrinkles, fine lines, and skin laxity.

### LIFT MODE

Combining warmth and microcurrents, this mode tightens the skin while providing support and lift to the muscles. It promotes the metabolism of muscle cells, enhancing the contours.

# TREATMENT SEQUENCE

### SLIDING METHOD:

The recommended sliding speed is 2cm / sec. If you feels too hot, please increase the sliding speed.

### CAUTION:

- . Ensure that the treatment head is fully in contact with the skin while using.
- . Use by sliding over the skin.
- . Continuously using the device on the same position may cause low-temperature burns on the skin.
- . Do not use on the upper eyelid and throat area (except for COOL mode).



Please use by sliding in the order shown on the left image. Note: Usage in the shaded area is prohibited (except for COOL mode).

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Mode	Recommended Skincare Prouducts*	Time	Intensity	Frequency in Use (Ref)**
COOL Mode	Can be used with/ without Eye Essence	About 3 Mins	I Level	Daily
FIRM Mode	Specialized Gel / Eye Essence	About 5 Mins	I Level	2-3 Times / Week
LIFT Mode	Specialized Gel / Eye Essence	About 5 Mins	I Level	2-3 Times / Week

<sup>\*</sup> It is important to use water-soluble skin care products. Avoid using oily or exfoliating skin care products, as this may result in machine failure or skin irritation.

# PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name	Paige Luminous Eye Beauty Device
Model	PA-ED0I
Rated Inpout	5V === 2A
Rated Output	About I0W
Charging Time	About I hrs
Usage Time	About 40 mins
Dimensions	Approx. 34mm (L) x 48mm (W) x 163mm (H)
Product Weight	Approx. 118 g

<sup>\*</sup>The charging time is related to the rated input. The charging time mentioned above is based on the rated input of 5V 2A. If the rated input is lower than 5V 2A, the charging time will become longer.

<sup>\*\*</sup>The recommended guidelines are for reference only and can be adjusted to meet individual needs.

# PRODUCT MAINTENANCE

### After Treatment:

After every use, clean the device promptly to maintain its cleanliness.

Cleaning steps are as follows:

- . Use a soft cloth that has been dampened with water, then wring it out, to clean the device. Avoid using hard cloths as they may scratch the surface and affect its performance.
  - ※ Avoid using solvents such as alkali, alcohol, thinner, benzene, volatile oil, gasoline, or nail polish remover, abrasive powder, hot water, or medicines to clean the device.
- ※ If the device comes into contact with essence or gel, please store it after cleaning.
- After cleaning, place the main unit on the stand to prevent the treatment head from being damaged by other objects.

# Avoid Storing The Beauty Device In The Following Environments:

- . Areas that are constantly exposed to direct sunlight, humidity or dust.
- . Places with excessively high or low temperatures, such as inside a car under the scorching sun
- . Areas with exposure to chemicals or gas and places subject to strong vibrations
- . Close to heating appliances and their surroundings, as well as areas with strong magnetic fields

### CAUTION:

If the device has not been used for over six months, please inspect it for any abnormalities before use(Check for cracks, etc.).

Using the device in a faulty state may result in an accident.

### WARRANTY

After Sales Service:

Two years of warranty (For details, please refer to the warranty terms and conditions on official website)

Please register the serial number (S/N) on the back of the packaging box on official website for new product warranty.

# Rechargeable Battery:

- . This device contains a rechargeable battery that must be replaced by a professional.
- Rechargeable batteries are considered consumables and are not covered under the warranty.
- . When the usage time after charging is extremely short, it may indicate that the battery life has reached its end.
- . In case you need to replace the rechargeable battery, please consult your dealer for assistance.

## Regarding Disposal and Environmental Protection:

- . When disposing of this device, please follow local laws and regulations.
- . The substance contained in the built-in lithium ion rechargeable battery may be harmful to the environment, so the battery must be removed before disposing of this device.
- This device must be powered off before removing the battery, and the battery must be disposed of safely.
- . Do not use other batteries to replace the battery inside this device, especially non-rechargeable batteries, as this may cause fires or electric shocks.
- Do not dispose of the battery with household waste. Ensure that the battery is disposed of at an official recycling center or collection point.

# Contact Information:

Hong Kong Company: Regal Silver Limited

Tel Number: 852-21866089

Address: Unit 1307, Vanta Industrial Centre,

21-33 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Shenzhen Company: Shenzhen Tian Hao Regal Silver Technology Limited Tel number: 86-13378665715

Address: No. 181, Jiangshi Road, Shiwei Community, Matian Street,

Guangming District, Shenzhen City, Guangdong, China

E-mail: cs@regal-silver.com

To ensure a smooth process, please contact customer service by email to confirm before sending the beauty device to the address listed above.

# DISCLAIMER

Regal Silver Limited is committed to ensuring that all information contained in this user manual is current and accurate, but shall not be held responsible for any errors or omissions. All information is subject to change without notice.

Regal Silver Limited shall not be liable for any loss incurred due to alleged misuse or use of the product in any manner other than the usage methods outlined in this user manual, on the product packaging and leaflet. When using the Eye beauty device, customers are responsible for understanding and complying with all product safety information.

This user manual may not be copied or translated into any language without the written authorization of Regal Silver Limited.

Regal Silver Limited makes no guarantees as to the effectiveness of Eye beauty device. The effectiveness of Eye beauty device will depend on the user's individual skin condition. We strongly recommend that all users consult a qualified healthcare professional before using any product(s).

The aforementioned statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. The products developed by Regal Silver Limited are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Before using any product, if you have any questions, please consult your professional healthcare advisor.





官網 (HK website)



微博扫码 关注动态







paigeluminous |Q|













天猫搜索"**珮肌"** 咨询购买 京东搜索"**珮肌**" 咨询购买

小红书搜索"**珮肌**" 关注动态 抖音搜索"**珮肌**" 关注动态

# (2) IIIII Paige